


# VECTOdrill™.

Premessa ottimale per stabilità primaria  
e osteointegrazione sicura.

Naturalmente Thommen Medical.

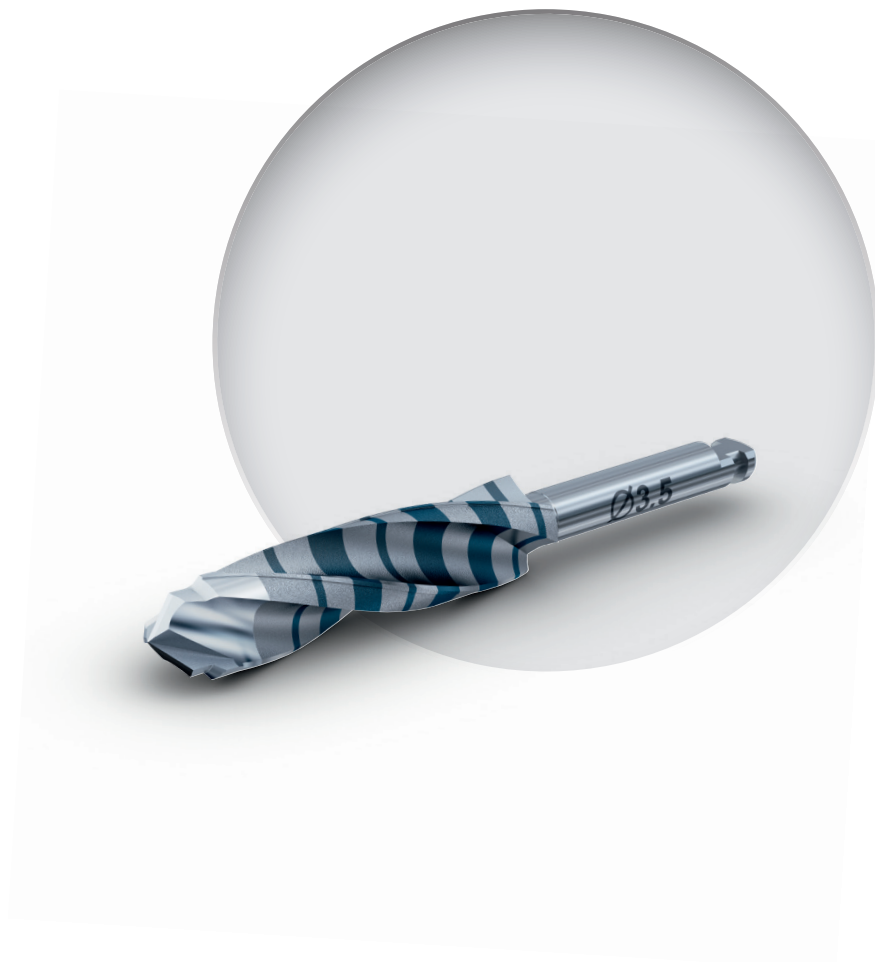

# Innovativa.


L'esclusivo sistema VECTOdrill™, composto da frese perfettamente coordinate, consente la preparazione atraumatica dell'osso e crea le premesse ottimali per la stabilità primaria e una sicura osteointegrazione.

---

«Lavorazione semplicemente piacevole! Guida precisa e massima silenziosità per un'osteotomia perfetta.»


PD Dr. Dr. med. D. Rohner, CFC Hirslanden, Aarau

---

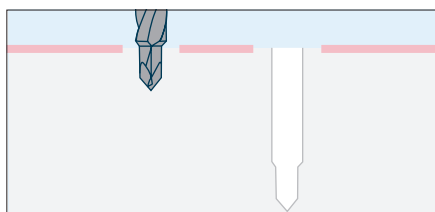


## Foro pilota

- **Nessuna creazione dell'invito**  
Definizione della posizione dell'impianto mediante la punta di centratura integrata
- **Precisione**  
Determinazione della profondità e dell'asse di fresatura mediante la fresa pilota
- **Potenza**  
Straordinarie proprietà di taglio

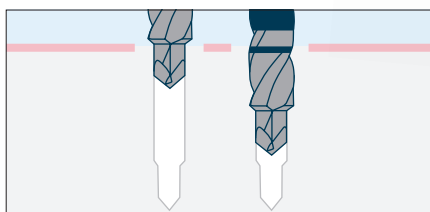

## Preparazione sequenziale

- **Controllo**  
La punta guida posiziona la fresa con sicurezza nel foro creato dalla fresa precedente
- **Procedura guidata**  
Lungo l'asse di fresatura definito
- **Silenziosità**  
Geometria di fresatura multitagliente

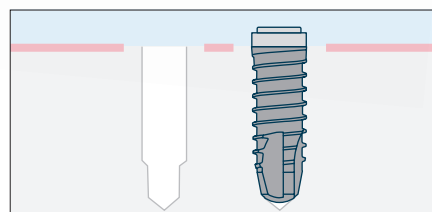

## Impianto autofilettante

- **Nessuna pressione**  
Congruenza perfetta tra letto implantare e diametro di nocciolo dell'impianto
- **Ottima stabilità primaria**  
I fianchi autofilettanti del filetto fissano l'impianto nell'osso

Le esclusive frese VECTOdrill™ insieme agli impianti autofilettanti e alla superficie superidrofila INICELL® creano le premesse ottimali per un'osteointegrazione sicura.

# Linea di prodotti VECTOdrill™

## Fresa VECTOdrill™ monouso

Acciaio inossidabile



- Pronta all'uso

**Monouso**



Fornita **sterile.**

Lunghezze disponibili:  
29 mm, 34 mm, 40 mm

## Fresa VECTOdrill™ pluriuso

Acciaio inossidabile



- Riutilizzabile, buon rapporto qualità-prezzo
- Ottima resistenza all'usura e alla corrosione

**Riutilizzabile**  
**Max. 20 cicli di preparazione\***

Fornita non **sterile.**  
Deve essere preparata prima di ogni utilizzo

Lunghezze disponibili:  
29 mm, 34 mm, 40 mm

## Fresa in ceramica VECTOdrill™ pluriuso

Ceramica mista di alta qualità  
ATZ (alumina toughened zirconia)



- Eccellente biocompatibilità
- Ottima resistenza all'usura
- Straordinaria resistenza alla corrosione

**Riutilizzabile**  
**max. 20 cicli di preparazione\***

Fornita non **sterile.**  
Deve essere preparata prima di ogni utilizzo

Lunghezze disponibili:  
29 mm, 34 mm

\* Un ciclo di preparazione corrisponde all'utilizzo della fresa su un paziente (chirurgia, pulizia e sterilizzazione). Per maggiori informazioni consultare il manuale sul ricondizionamento THM61131, «[www.ifu-tm.com/THM61131](http://www.ifu-tm.com/THM61131)».

#### HEADQUARTERS

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
2540 Grenchen | Svizzera  
Tel. +41 61 965 90 20  
Fax +41 61 965 90 21  
info@thommenmedical.com

#### FILIALI NAZIONALI/DISTRIBUTORI

##### AUSTRIA

Thommen Medical Austria GmbH  
Mühlgasse 3  
2322 Zwölfaxing | Austria  
Tel. +43 660 2011953  
info@thommenmedical.at

##### BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V.  
Dierenriem 1  
3738 TP Maartensdijk | Paesi Bassi  
Tel. +31 30 68 68 468  
Info.benelux@thommenmedical.nl

##### CINA

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.  
Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1  
Lane 129 | DaTian Road | JingAn District  
Shanghai | Cina  
Tel. +86 21 62723077  
Fax +86 21 62175264

##### COREA DEL SUD

KMbio  
02 Ho, 129, Dongseo-daero  
Seobuk-gu, Cheonan-si  
Chungcheongnam-do  
Republic of Korea  
Tel. +82 070 3141 2875  
kmbio149@naver.com

##### CROAZIA

Futura Dental d.o.o.  
Kralja Zvonimira 108  
10 000 Zagreb | Croazia  
Tel. +385 91 6814 860  
info@futura-dental.hr  
www.futura-dental.hr

##### FEDERAZIONE RUSSA

CIS – JSC Geosoft  
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.  
Moscow, 129626 | Russian Federation  
Tel. +7 495 663 22 11  
thommenmedical@geosoft.ru

##### FINLANDIA

Vector Laboratories Oy  
Engelinaukio 8 B  
00150 Helsinki | Finlandia  
Tel. +358 400 940 700  
labs@vektor.fi

##### FRANCIA

Thommen Medical France  
10 avenue Gabriel Pierné  
77680 Roissy-en-Brie | Francia  
Tel. +33 1 83 64 06 35  
Fax +33 3 89 33 52 53  
infos@thommenmedical.fr

##### GERMANIA

Thommen Medical Deutschland GmbH  
Am Rathaus 2  
79576 Weil am Rhein | Germania  
Tel. +49 7621 422 58 30  
Fax +49 7621 422 58 41  
info@thommenmedical.de

##### GIAPPONE

J. Morita Corporation  
3-33-18, Tarumi-cho  
Suita | Osaka 564-8650 | Giappone  
Tel. +81 6 6384 6921  
Fax +81 6 6384 6746  
www.morita.com

##### HONG KONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.  
Level 13, 68 Yee Wo Street  
Causeway Bay | Hong Kong  
Tel. +852 530 876 41

##### LITUANIA/LETTONIA

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB  
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas  
Lituania LT-49191  
Tel. +370 37 201072  
Cellulare +370 65 771550  
info@cmp.lt  
www.cmp.lt

##### MEDIO ORIENTE

Star Science International GmbH  
Jupiterstrasse 57  
3015 Berna | Svizzera  
Tel. +41 31 941 07 31  
Fax +41 31 941 07 33  
star.science@bluewin.ch

##### NORVEGIA

Novus Dental AS  
Johannes Bruns gate 5  
0452 Oslo | Norvegia  
Tel. +47 951 07 007  
post@novusdental.no  
www.novusdental.no

##### POLONIA

C.WITT DENTAL Sp. z o. o.  
Ul. Granitowa 10  
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Polonia  
Tel. +48 56 623 61 23  
biuro@cwittdental.pl  
www.cwittdental.pl

##### REPUBBLICA Ceca

C. Witt Dental spol. s r.o.  
Cihlářská 643/19  
602 00 Brno  
Tel. +420 739 043 449  
helena.novak@cwittdental.cz

##### SINGAPORE

FONDACO Pte Ltd  
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06  
Eunos Techno Link  
Singapore 415937 | Singapore  
Tel. +65 6392 2806  
Fax +65 6392 1296  
fondaco@fondacosg.com

##### SPAGNA/PORTOGALLO

Thommen Medical Ibérica  
C/ Los quintos n 1  
03350 Cox (Alicante) | Spagna  
Tel. +34 96 536 10 20  
Cellulare +34 606 99 78 34  
info@thommeniberica.com

##### SVIZZERA

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
2540 Grenchen | Svizzera  
Tel. +41 32 644 30 20  
Fax +41 32 644 30 25  
info@thommenmedical.ch

##### TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.  
No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.  
Taipei, 103 Taiwan  
Tel. +886 2 2585 1669  
Fax +886 2 2585 0892  
enjye168@gmail.com

##### TURCHIA

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.  
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe  
Şişli 34394 İstanbul | Turchia  
Tel. +90 212 2727577  
Fax +90 212 2727628  
info@bioport.com.tr  
www.bioport.com.tr

##### USA/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.  
1375 Euclid Avenue | Suite 450  
Cleveland OH 44115 | USA  
Tel. +1 866 319 9800 (toll free)  
Fax +1 216 583 9801  
info.us@thommenmedical.com  
orders.us@thommenmedical.com



#### DISTRIBUTORE NAZIONALE ITALIA

Dental Trey S.r.l.  
Via Partisani, 3  
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italia  
Tel. +39 0543 929111  
Fax +39 0543 940659  
implantologia@dental Trey.it  
www.dental Trey.it