

# Clever

**Dynamic Tibase®** – Per canali delle viti angolati



**Dynamic  
Tibase®**

Driven by science, not trends.

# Dynamic Tibase<sup>®</sup> per Thommen Medical

## Flessibile e indipendente nella scelta della tecnica di fissaggio

Non lasciare che sia l'asse dell'impianto a determinare le opzioni di fissaggio, decidi tu stesso. Dynamic Tibase<sup>®</sup> è la soluzione ideale per ricostruzioni avviate esteticamente impegnative. Dynamic Tibase<sup>®</sup> consente di progettare l'orientamento del canale della vite con una divergenza massima di 35° rispetto all'asse dell'impianto. Diventa così possibile utilizzare ricostruzioni avviate anche in situazioni che finora potevano essere trattate esclusivamente con una soluzione cementata.

Per il flusso di lavoro digitale sono disponibili librerie CAD/CAM.  
A questo scopo visitare il sito [www.thommenmedical.com](http://www.thommenmedical.com).


3shape

exocad


dental wings



Situazione ossea

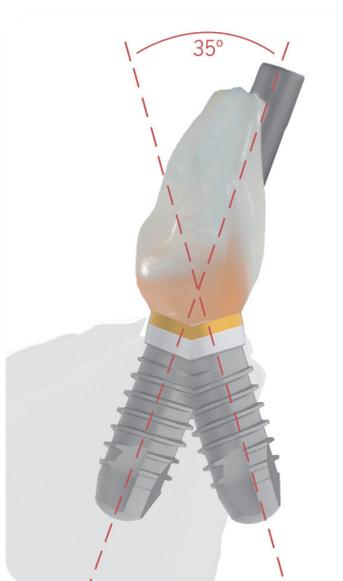



Posizione ideale

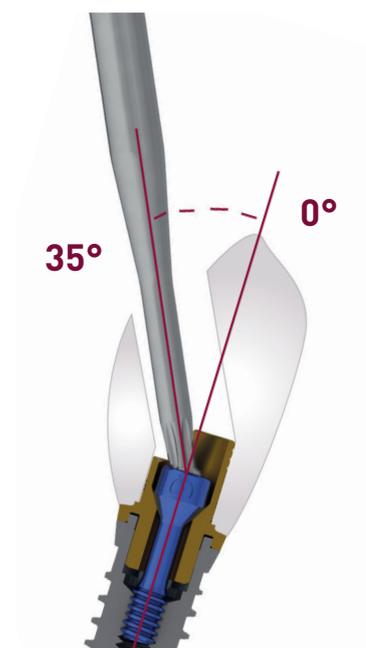

Soluzione  
**Dynamic Tibase<sup>®</sup>**  
Legga di Ti, anodizzato

## Affidabile

La trasmissione a vite esalobata garantisce il fissaggio sicuro del restauro e consente un'angolazione fino a 35°.

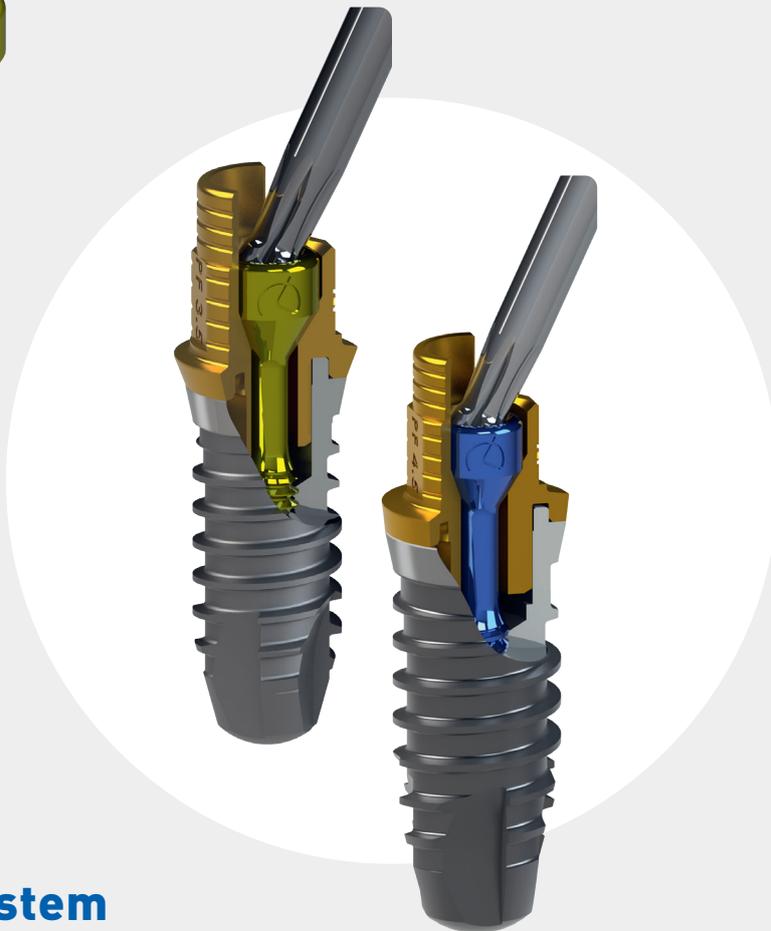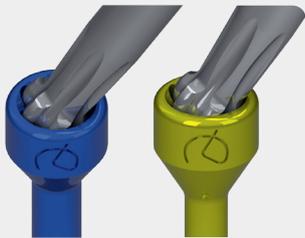

## Flessibile


- Per soluzioni su singolo dente e ponte
- Due diversi tipi di abutment: standard e adattabile in lunghezza
- Scanalature circolari di ritenzione per l'applicazione provvisoria



## Ingegnoso Captive System


La vite dell'abutment viene inserita nel Ti-Base prima dell'adesione.

- Canale per la vite stretto ( $\varnothing$  2,0 mm)
- Maggiore resistenza e volume aumentato della sovrastruttura
- Superfici esterne più estese (ad es. occlusione)

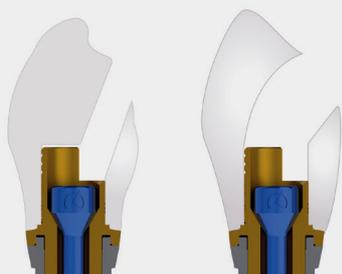

Captive System

Standard System

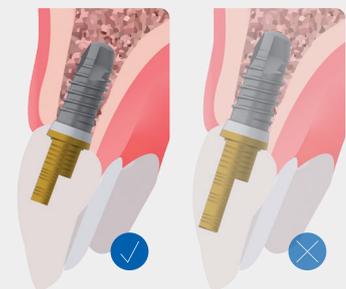

## Adattabile

Il cilindro adattabile in altezza garantisce un supporto ottimale alla sovrastruttura.

- Per impianti inseriti in profondità o corone lunghe, corrispondentemente alla situazione clinica
- Massimo supporto della sovrastruttura
- Indicato per ricostruzioni provvisorie

## Distribuito da

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
2540 Grenchen | Svizzera  
Tel. +41 61 965 90 20  
Fax +41 61 965 90 21  
info@thommenmedical.com

## Produttore

Talladium España, S.L.  
Avenida Blondel, 54, 3º  
25002 Lleida | Spagna

 0051